How to use

Notice d'usage




Watch the vide



Position the Overlay with the air system behind the limb. If you feel tibial pressure, rotate it slightly until comfortable.

Placez l'Overlay avec le système d'air derrière le membre. En cas de pression tibiale, faites-le pivoter légèrement jusqu'à trouver une position confortable

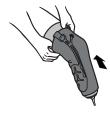

Slide the Overlay over the liner ensuring it sit 4cm above distal end.

Enfilez l'Overlay par-dessus votre manchon à environ 4 cm de l'extrémité distale.



The prosthesis can be slid back on. All the air cells must be in the socket below the trim line

> Enfilez votre prothèse et assurez-vous que toutes les cellules d'air soient à l'intérieur de l'emboîture.



Now you are in control! Simply deflate the Overlay before removing the prosthesis and the liner.

Dégonflez l'Overlay avant de retirer la prothèse et le manchon.

Inflate

Gonfler



Deflate

Dégonfler



video

Once removed

Une fois retiré





Aiustez la pression avec la pompe externe.



Use the integrated pump to fine-tune cushioning throughout the day.

> Utilisez la pompe intégrée pour ajuster la pression tout au long de la iournée.



Press the silver valve pin to deflate the Overlay.

> Appuyez sur la bille argentée de la valve pour dégonfler l'overlay.



Remove the prosthesis and the Overlay.

Retirez la prothèse et l'Overlay.



Stretch and press the air system while activating the exit valve to release remaining air.

> Étirez et compressez les cellules en appuyant sur la valve de sortie pour faire sortir l'air.



Washing Precautions

- Do not put in the washing machine and do not wring out the device to avoid damage.
- O Do not expose the integrated pump and valve to water or fluid.
- O Do not place it in a dryer or use any other heat source for drying.
- The use of unsuitable detergents may cause the device to deteriorate and void the warranty
- → Clean the device once a day only with approved cleansing products including neutral soap or mild detergent that is pH balanced



Précautions d'entretien

- Ne pas mettre l'appareil dans une machine à laver ni l'essorer pour éviter des dommages.
- O Ne pas exposer la pompe intégrée et la valve à l'eau ou à des liquides.
- Ne pas le mettre dans un sèche-linge ni utiliser de source de chaleur pour le séchage.
- ① L'utilisation de détergents inappropriés peut détériorer le produit et annuler la garantie.
- → Nettoyez l'appareil une fois par jour uniquement avec du savon neutre ou un détergent doux, équilibré en pH.